


Ficha de Especificações

	PowerPort™ isp M.R.I.™ Ports Implantáveis	PowerPort™ isp Ports Implantáveis	PowerPort™ Slim Ports Implantáveis
• Marcações de Profundidade do Cateter a cada 1 cm • Taxa de Fluxo de Gravidade > 500 ml/h com Agulha não Perfurante de Calibre 19 G • Intervalo de Flushing de 28 dias (exceto quando indicado)			
Port			
Material do Reservatório	Plástico com Marcadores e Haste de Titânio	Titânio	Titânio
Perfil	Intermediário	Intermediário	Perfil discreto
Diâmetro de Base (mm)	29,0	30,0	28,0
Altura (mm)	11,6	11,3	9,9
Volume Interno (ml)	0,6	0,6	0,5
Septo			
Diâmetro (mm)	13,0	13,0	8,9
Taxa de fluxo de injeção			
Agulha PowerLoc™ Calibre 19 G	5 ml/seg	5 ml/seg	5 ml/seg
Agulha PowerLoc™ Calibre 20 G	5 ml/seg	5 ml/seg	5 ml/seg
Agulha PowerLoc™ Calibre 22 G	2 ml/seg	2 ml/seg	2 ml/seg
Taxas de MR			
Segurança/Condicional			

 Segurança  Condicional: 330 Gauss/cm

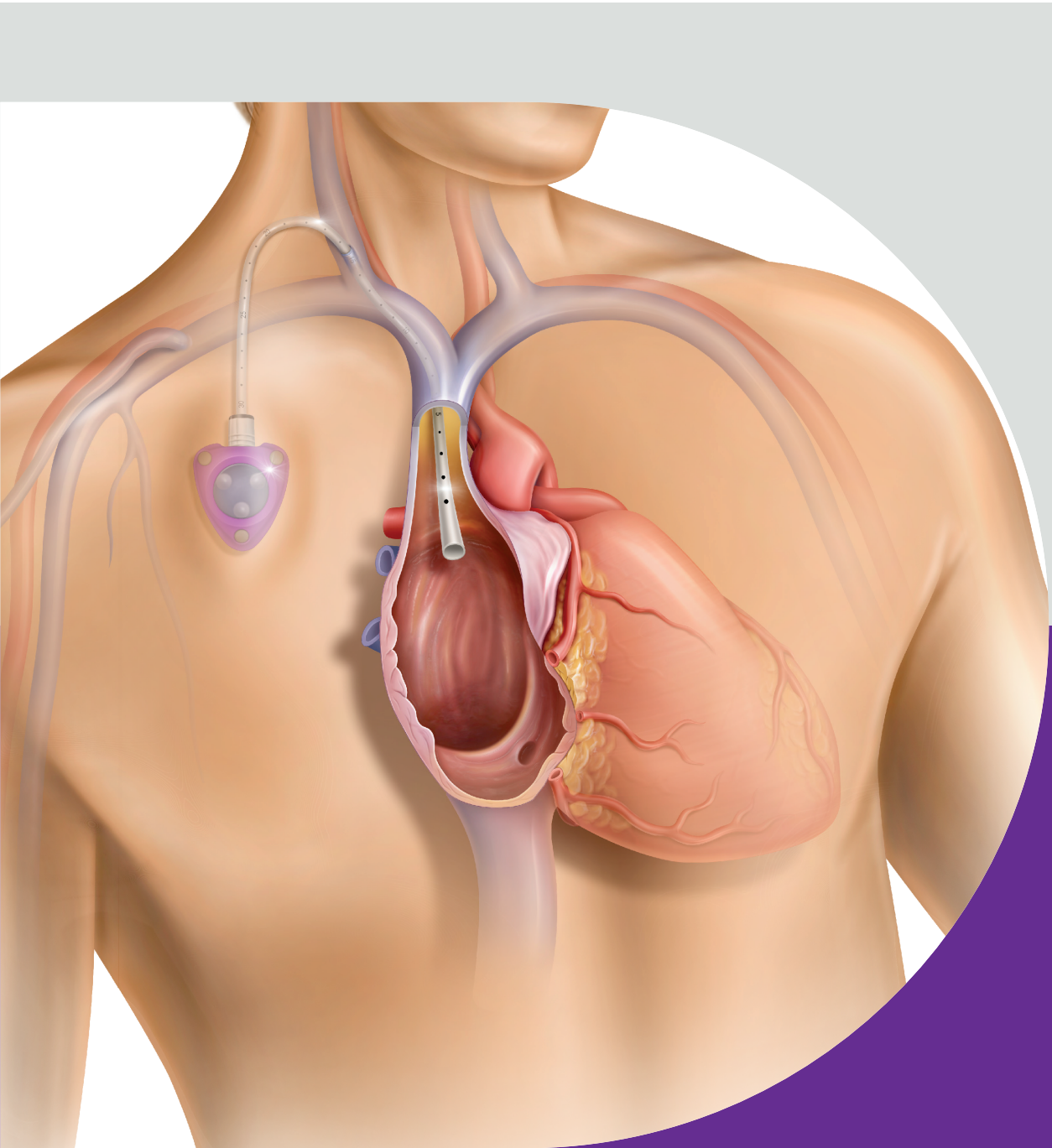

PowerPort™

Cateter totalmente implantado BD



www.bd.com/pt-br

©2023 BD. BD, BD Logo e todas as outras marcas registradas são propriedade da Becton, Dickinson and Company. Conforme requerido, o(s) produto(s) BD citado(s) encontram-se devidamente regularizado(s) junto à ANVISA. Para mais informações, contacte a BD em SAC: 0800 055 5654 ou cs_brasil@bd.com. Consulte os rótulos e instruções de uso do produto para qualquer indicação, contraindicação, riscos, advertências, cuidados e instruções de uso. BD-91064



Características PowerPort™



O acesso venoso de longa permanência possibilita:

- Receber terapias IV
- Reduzir a necessidade de outros acessos levando a não repetição de “picadas” de agulhas
- Maior conforto ao paciente



Pontos identificáveis:

- Pontos de Palpação no septo
- Formato triangulado
- Identificador Radiopaco



Permite realizar exame de imagem


- Volume máximo recomendado de 5 ml/s
- Configura limite de pressão de 300 psi
- Recebe tomografia computadorizada com contraste



PowerPort™ isp M.R.I.
Ports Implantáveis



PowerPort™ M.R.I.
Ports Implantáveis

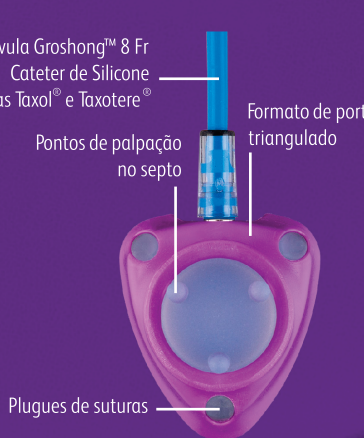

PowerPort™ isp M.R.I.
Ports Implantáveis

Especificações PowerPort™

PowerPort™ isp M.R.I™

Ports Implantáveis

Código do Produto	Descrição	Plug de Sutura	Tamanho
□ 8806060	PowerPort™ isp M.R.I. com cateter de 6 Fr ChronoFlex™ acoplável	Com silicone	1,3 mm DI 45 cm de comprimento
□ 8806061	PowerPort™ isp M.R.I. com cateter de 6 Fr ChronoFlex™ acoplável	Aberto sem silicone	1,3 mm DI 45 cm de comprimento
□ 8808060	PowerPort™ isp M.R.I. com cateter de 8 Fr ChronoFlex™ acoplável	Com silicone	1,6 mm DI 45 cm de comprimento
□ 8808061	PowerPort™ isp M.R.I. com cateter de 8 Fr ChronoFlex™ acoplável	Aberto sem silicone	1,6 mm DI 45 cm de comprimento
□ 8808560	PowerPort™ isp M.R.I. com Cateter Groshong™ 8 Fr acoplável*	Com silicone	1,5 mm DI 45 cm de comprimento
□ 8808561	PowerPort™ isp M.R.I. com Cateter Groshong™ 8 Fr acoplável*	Aberto sem silicone	1,5 mm DI 45 cm de comprimento

DI: Diâmetro Interno



PowerPort™ Slim

Ports Implantáveis

Código do Produto	Descrição	Plug de Sutura	Tamanho
□ 8716000	PowerPort™ de Titânio com cateter 6 Fr ChronoFlex™ acoplável	Com silicone	1,3 mm DI 60 cm de comprimento
□ 8716001	PowerPort™ de Titânio com cateter 6 Fr ChronoFlex™ acoplável	Aberto sem silicone	1,3 mm DI 60 cm de comprimento

DI: Diâmetro Interno



PowerPort™ isp

Ports Implantáveis


Código do Produto	Descrição	Plug de Sutura	Tamanho
□ 8706060	PowerPort™ isp de Titânio com cateter 6 Fr ChronoFlex™ acoplável	Com silicone	1,3 mm DI 45 cm de comprimento
□ 8706061	PowerPort™ isp de Titânio com cateter 6 Fr ChronoFlex™ acoplável	Aberto sem silicone	1,3 mm DI 45 cm de comprimento
□ 8708060	PowerPort™ isp de Titânio com cateter 8 Fr ChronoFlex™ acoplável	Com silicone	1,6 mm DI 45 cm de comprimento
□ 8708061	PowerPort™ isp de Titânio com cateter 8 Fr ChronoFlex™ acoplável	Aberto sem silicone	1,6 mm DI 45 cm de comprimento
□ 8708560	PowerPort™ isp de Titânio com cateter Groshong™ acoplável 8 Fr	Com silicone	1,5 mm DI 45 cm de comprimento
□ 8708561	PowerPort™ isp de Titânio com cateter Groshong™ acoplável 8 Fr	Aberto sem silicone	1,5 mm DI 45 cm de comprimento

DI: Diâmetro Interno




Características & Benefícios Exclusivos para Cateter Groshong™:

A válvula Groshong™ de três vias permite a infusão e aspiração de sangue, ajudando a reduzir o risco de aeroembolismo, refluxo sanguíneo e coagulação. A frequência de Flushing é diminuída porque a válvula impede que o sangue volte para o cateter e coagule. Como o sistema é fechado, a manutenção de rotina é simplificada e a necessidade de heparina é praticamente eliminada.

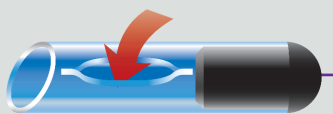

A pressão negativa abre a válvula para dentro, permitindo a aspiração de sangue

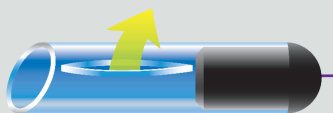

A pressão positiva abre a válvula para fora, permitindo a infusão



Em pressão neutra, a válvula permanece fechada, reduzindo o risco de aeroembolismo, refluxo sanguíneo e coagulação